

## Referências para encomenda

### Reagentes

REF		CONT
ATTUR-B00	Universal dedicado	1 x 50 ml R1 + 1 x 5 ml R2
ATTUR-H00	Universal dedicado	2 x 50 ml R1 + 1 x 15 ml R2

### Outros produtos necessários

REF		CONT
MPREK-000	Kit de Calibradores Multiparamétrico (5 Níveis)	5 x 1 ml
MPREH-001	Calibrador Multiparamétrico Alto	1 x 1 ml
MPREH-005	Calibrador Multiparamétrico Alto	1 x 5 ml
MPCOS-002	Controlo Multiparamétrico Baixo	1 x 2 ml
MPCON-002	Controlo Multiparamétrico Médio	1 x 2 ml
MPCOX-002	Controlo Multiparamétrico Alto	1 x 2 ml

## Campo de utilização – Destino

Reagente de diagnóstico in vitro para a determinação quantitativa da alfa1-antitripsina em amostras de origem humana por imunoturbidimetria em sistemas fotométricos.

## Interesse clínico – Validade científica

A alfa-1-antitripsina, também designada de "inibidor de alfa-1-protease", é uma proteína da família das serpinas que é sintetizada sobretudo no fígado pelos hepatócitos. A sua função principal consiste em inibir a elastase neutrófila e impedir, assim, a degradação enzimática das estruturas alveolares do pulmão. Esta permite igualmente inibir outras enzimas proteolíticas tais como a tripsina, a quimotripsina ou ainda a trombina.

A alfa-1-antitripsina é uma proteína da fase inflamatória precoce. A sua concentração aumenta, portanto, drasticamente em caso de inflamação.

A deficiência em alfa-1-antitripsina, que pode resultar de uma variação genética, reduz a inibição das enzimas proteolíticas e pode conduzir a um enfisema pulmonar ou a doenças hepáticas. Taxas reduzidas de alfa-1-antitripsina também podem estar associadas a cirroses, cancros do fígado ou hepatites juvenis.

## Princípio do método

A alfa1-antitripsina existente na amostra a dosear reage especificamente com um antissoro anti-alfa1-Antitripsina humana e a turbidez induzida pela formação do complexo imune antígeno-anticorpo é medida a 340 nm e 700 n. A turbidez medida é proporcional à concentração em alfa1-Antitripsina da amostra.

## Advertências e precauções de utilização

- Exclusivamente para diagnóstico in vitro.
- Deve ser manipulado por pessoal habilitado sob a responsabilidade de um biólogo.
- Os produtos de origem humana foram submetidos a um rastreio negativo relativamente a anticorpos anti-VIH 1 e 2, anticorpos anti-VHC e antígeno HBs, mas devem, no entanto, ser manipulados como produtos potencialmente infecciosos.
- Estes produtos contêm azida de sódio. Os produtos que contêm azida de sódio devem ser manipulados com precaução: evitar a ingestão e o contacto com a pele ou as mucosas.
- A azida de sódio torna-se explosiva ao contacto com metais pesados como o cobre ou o chumbo.

## Amostras

### Condições de colheita

Colher as amostras segundo as técnicas laboratoriais clássicas e, por conseguinte, utilizar apenas os procedimentos, os tubos ou os recipientes de colheita apropriados.

### Tipo de amostra

Soro e plasma frescos.

### Conservação e estabilidade das amostras

Temperatura	Estabilidade
- 70 °C	≤ 3 meses
- 20 °C	≤ 3 meses
4 - 8 °C	≤ 5 meses
20 - 25 °C	≤ 3 meses

As presentes informações proveem de dados fornecidos por "Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests" e por "WHO".

## Reagentes

### Composição e concentrações/Conservação

Compostos ativos:

Reagente R1: nenhum.

Reagente R2: antissoro de cabra anti-alfa-1-antitripsina humana (título ± 3,651 mg/ml).

Outros componentes:

Reagente R1: tampão, polímero, sal inorgânico e conservante.

Reagente R2: tampão, sal inorgânico e conservante.

Temperatura de conservação:

Reagente R1: 2 - 8 °C.

Reagente R2: 2 - 8 °C.

### Preparação

Prontos a utilizar.

### Conservação e estabilidade

Os reagentes são estáveis até ao prazo de validade indicado na embalagem (mês completo), nas condições de conservação e de manipulação recomendadas a seguir indicadas:

- Frasco não aberto conservado à temperatura indicada na embalagem.
- Frasco aberto: fechar após utilização ou colocar no analisador fechado para este efeito, não contaminado pela manipulação e conservado à temperatura indicada na embalagem.

Nota:

- Não congelar os reagentes.
- Os reagentes à base de nanopartículas podem sedimentar com o passar do tempo. Pode ser necessário homogeneizá-los suavemente fazendo girar o frasco várias vezes.

### Outros materiais necessários

Equipamento laboratorial habitual, tal como um sistema analítico equipado com um detetor fotométrico.

## Calibração

### Aferição

A curva de calibração é traçada utilizando o kit de calibração indicado na secção “Referência para encomenda”. O ponto zero da curva de calibração é obtido com soro fisiológico.

### Rastreabilidade

O método foi padronizado relativamente a um método de referência rastreável ao padrão internacional, tal como descrito na ficha técnica dos calibradores associados (ver secção “Referências para encomenda”).

Calibrar o método quando o número de lote do reagente muda ou em caso de modificação dos desempenhos (contactar o fabricante se as modificações subsistirem) ou quando o controlo da qualidade assim o exigir.

## Controlo de qualidade

A frequência dos controlos e os limites de confiança devem ser adaptados às exigências do laboratório. Os resultados devem situar-se dentro dos limites de confiança definidos. Cada laboratório deve estabelecer o procedimento a seguir caso os resultados se situem fora dos limites definidos. Cumprir a legislação nacional e as diretivas locais em vigor em matéria de controlo de qualidade.

A curva de calibração e a sua estabilidade devem ser validadas utilizando os materiais de controlo indicados na secção “Referências para encomenda”.

## Valores de referência

	Valores de referência
Recém-nascidos	1,45 - 2,70 g/L
Adultos	0,78 - 2,00 g/L
> 60 anos	1,15 - 2,00 g/L

Unidades internacionais: g/L

Unidades convencionais: mg/dL

As presentes informações proveem de dados fornecidos por “Clinical guide to laboratory tests”. Cada laboratório deve verificar a validade dos seus valores e estabelecer, conforme necessário, os seus próprios valores de referência de acordo com a população analisada.

## Desempenhos analíticos

Os desempenhos analíticos aqui indicados são fornecidos a título indicativo. Os resultados obtidos pelo laboratório podem diferir destes valores.

Os desempenhos analíticos foram determinados seguindo as indicações de “Guide technique d’accreditation de vérification (Portée A)/validation (Portée B) des méthodes en biologie médicale”; document SH GTA 04 Révision 01.

### Intervalo de medição

0,007 - 3,50 g/L

O intervalo de medição é fixado pelo limite de quantificação e pelo limite de linearidade. As amostras com uma concentração superior ao limite superior devem ser diluídas.

### Limite de deteção

0,002 g/L

Trata-se do sinal mais pequeno expresso em quantidade ou concentração que pode ser distinguido com determinada probabilidade de um branco realizado nas mesmas condições.

O estudo do limite de deteção baseia-se na análise estatística da diferença de sinais observada entre os brancos e as amostras.

## Interferências (especificidade analítica)

Não existe qualquer reação cruzada conhecida do antissoro ou dos anticorpos utilizados.

As amostras com coloração anormal e com partículas podem causar, conforme o sistema analítico, erros de doseamento. Estas amostras devem ser clarificadas química ou fisicamente antes do doseamento.

## Precisão

A precisão é avaliada recorrendo à repetibilidade (CV dentro de uma série) e à fidelidade intermediária (CV entre séries).

	Repetibilidade (n=30)		Reprodutibilidade (n=30)	
	Média (g/L)	CV (%)	Média (g/L)	CV (%)
Nível 1	0,58	1,12	0,59	1,61
Nível 2	1,17	0,85	1,17	1,25
Nível 3	1,76	1,11	1,77	1,59

## Justeza – Exatidão

A justeza, quantificada pelo viés, é calculada comparando a média obtida no estudo de fidelidade intermediária, estabelecida com amostras de CQI, com o valor-alvo esperado, assimilado ao valor “verdadeiro” da amostra testada.

A exatidão é definida como a estreiteza da concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro de um mensurando (grandeza que se pretende medir).

A DiAgam autoriza um viés de 5% em relação ao padrão internacional ou a um método de referência rastreável ao padrão internacional, caso exista.

---

## Limites do método

Os resultados deste teste devem ser sempre interpretados em função dos antecedentes clínicos do doente, os sinais clínicos e outras constatações.

### Prozona

Ao limitar a linearidade ao valor do limite superior do intervalo de medição, não foi observado qualquer efeito do excesso de antígeno para amostras com uma concentração até 17,37 g/L.

### Efeito de matriz

As amostras de controlos interlaboratoriais e de controlos podem dar resultados diferentes dos obtidos com outros métodos de doseamento, devido ao efeito de matriz. Nesse caso, poderá ser necessária uma análise dos resultados em função dos valores-alvo específicos do método utilizado. Em caso de dúvida, contactar o fabricante.

---

## Procedimento de utilização

Se o aplicativo correspondente ao ensaio não estiver instalado no seu analisador, entre em contato com DiAgam. Na verdade aplicações CE validadas estão disponíveis a partir do fabricante.

Para uma descrição detalhada de como executar um ensaio, consulte as instruções de operação do seu sistema.

---












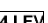






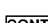


## Bibliografia


1. Tietz Textbook of Clinical chemistry and molecular Diagnostics, fourth edition, edited by Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood, David E. Bruns, 2006
2. Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations & Stability of blood, plasma and serum samples. Publication WHO/DIL/LAB/99.1 Rev. 2. Jan. 2002.
3. Clinical guide to laboratory tests, second edition, edited by Norbert W. Tietz, 1990
4. CLSI. Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition. CLSI document H3-A6 (ISBN 1-56238-650-6). CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA; 2007.

5. NCCLS. Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens; Approved Standard-Fifth Edition. NCCLS document H4-A5 [ISBN 1-56238-538-0]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA, 2004.

## **Legenda dos símbolos**

Os símbolos seguintes são suscetíveis de figurar no acondicionamento e no rótulo:

 <b>LOT</b>	Número de lote	 <b>BUF</b>	Tampão
	Utilizar até	 <b>CAL</b>	Calibrador
	Fabricante	 <b>H</b>	Elevado
 <b>IVD</b>	Dispositivo médico de diagnóstico in vitro	 <b>M</b>	Médio
	Temperatura (Conservação a)	 <b>L</b>	Baixo
 <b>REF</b>	Referência	 <b>4 LEV</b>	4 níveis
	Consultar as instruções de utilização	 <b>5 LEV</b>	5 níveis
 <b>REAG</b>	Reagente	 <b>6 LEV</b>	6 níveis
 <b>KIT</b>	Kit	 <b>CONTROL</b>	Controlo
 <b>CONT</b>	Conteúdo		Este produto está conforme com a Diretiva Europeia n.º 98/79/CE relativa aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro
 <b>Ab</b>	Anticorpos ou Antissoro		

 DiAgam Headquarters Distributed by	DiAgam Belgium: Rue du Parc Industriel 40, 7822 Ghislenghien, Belgium Avenue Louis Lepoutre 70, 1050 Bruxelles, Belgique DiAgam France: Boulevard de la Liberté 130, 59000 Lille, France
--	--

All product names, registered trademarks, company names in this document remain the property of their respective owners.